

# Neop | Chariots de soins 600 x 400

## Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Léger et maniable
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 80, 100 ou 120 cm
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités



### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit, bas gauche)

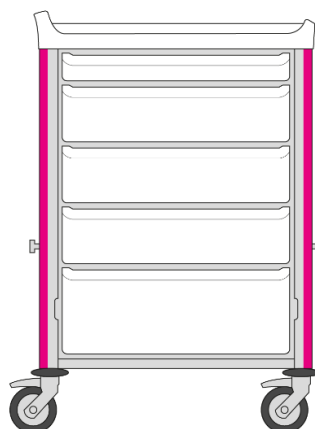

#### Référence

8YS64H100TJ7

### TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE + ACC. 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



#### Référence

8YS64H100TJ4SF

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



#### Référence

8YS64H100TJ4

## TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ1

## TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence


8YS64H100TJ5F

## TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

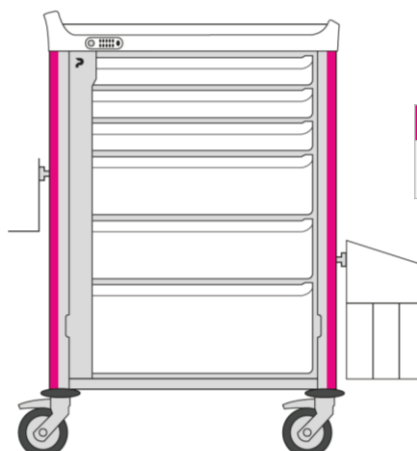

Référence

8YS64H100TJ5

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ2

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TJ6

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ3

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TT6SF

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TT6

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT1

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm




Référence

8YS64H100TT7

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

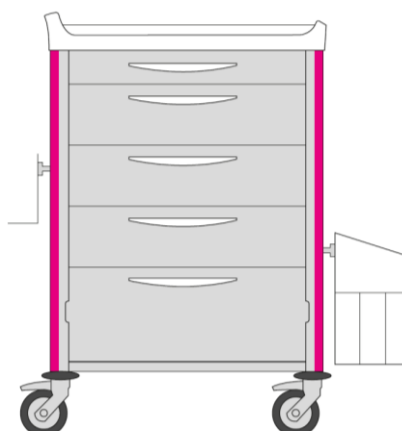

Référence

8YS64H100TT4SF

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (en bas à droite et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT2

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L




Référence

8YS64H100TT5

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

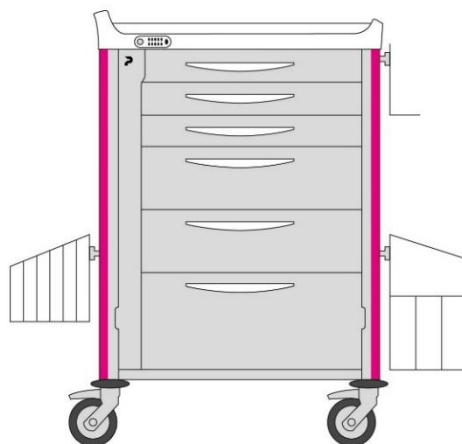

Référence

8YS64H100TT3

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 80 cm


| Référence       | Désignation  |
|-----------------|--|
| 8YCHM164H80FBC  | Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette thermoplastique + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm) |
| 8YCHM164H80CFBC | Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)         |

### Chariots hauteur 100 cm

#### CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVIL EN COMPACT

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en compact
- Fermeture à battant
- Serrure à code

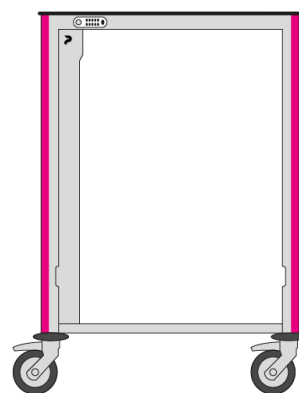


| Référence        | Désignation   |
|------------------|---|
| 8YCHM164H100CFBC | Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H100 + tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm) |

#### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

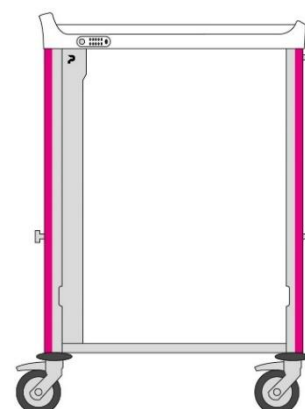

| Référence     | Désignation  |
|---------------|--|
| 8YCHS164H100  | Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm) |
| 8YCHST164H100 | Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + serrure code + parois pour tiroirs télescopiques      |



## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




| Référence      | Désignation   |
|----------------|---|
| 8YCHS164H100T  | Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + intercalaires standards – pas de 40 mm |
| 8YCHST164H100T | Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + parois pour tiroirs télescopiques      |

## CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)

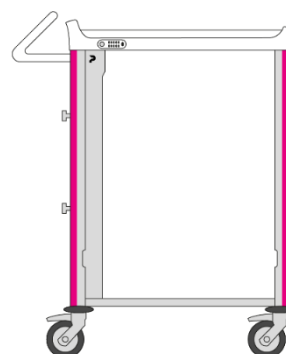


| Référence        | Désignation  |
|------------------|--|
| 8YCHM164H100_BCP | Chariot de soins NEOP 1 col. 600x400 H100 + battant + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm) |

## CHARIOT AVEC OPTION MOTORISATION

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation

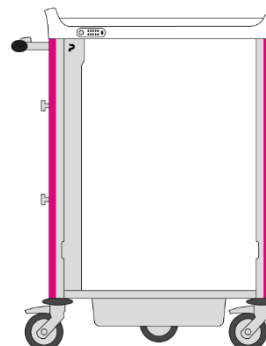

| Référence        | Désignation   |
|------------------|---|
| 8YCHM164H100_BCM | Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 avec option motorisation + battant + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm) |

# Composition sur mesure

## ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

|   | Chariot hauteur 80 cm* | Chariot hauteur 100 cm* | Chariot hauteur 120 cm* |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm) | 8Y164H80P4             | 8Y164H100P4             | 8Y164H120P4             |
| Parois pour tiroirs télescopiques                             | -                      | 8Y164H100T              | 8Y164H120T              |

Ces références comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

## ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

|   |                 | Chariot hauteur 80 cm*                              | Chariot hauteur 100 cm* | Chariot hauteur 120 cm* |              |
|---|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Tablette        | en thermoplastique avec découpe                     | 8Y001_6400TH            |                         |              |
|   |                 | en thermoplastique sans découpe                     | 8Y001_6400THSP          |                         |              |
|   |                 | en stratifié compact                                | 8Y001_6400CP1           |                         |              |
| 2 | Fermeture       | rideau pour intercalaires standards                 | 8Y002_6008F3            | 8Y002_6010F3            | 8Y002_6012F3 |
|   |                 | battant pour tiroirs télescopiques                  | -                       | 8Y002_0010F2            | 8Y002_0010F2 |
|   |                 | battant pour intercalaires standards                | 8Y002_0008F1            | 8Y002_0010F1            | -            |
| 3 | Serrure à code  | pour fermeture rideau                               | 8Y003CODE3              |                         |              |
|   |                 | pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques   | 8Y003CODE2              |                         |              |
|   |                 | pour fermeture battant pour intercalaires standards | 8Y003CODE1              |                         |              |
|   | Serrure à badge | pour fermeture rideau                               | 8Y003BADGE3             |                         |              |
|   |                 | pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques   | 8Y003BADGE2             |                         |              |
|   |                 | pour fermeture battant pour intercalaires standards | 8Y003BADGE1             |                         |              |
| 4 | Couleur         | Rose magenta  | 8Y004_0008RM            | 8Y004_0010RM            | 8Y004_0012RM |
|   |                 | Vert pomme  | 8Y004_0008VP            | 8Y004_0010VP            | 8Y004_0012VP |
|   |                 | Bleu céleste  | 8Y004_0008BC            | 8Y004_0010BC            | 8Y004_0012BC |
| 5 | Marquage        | Marquage spécifique                                 | 8Y132                   |                         |              |



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Tablette supérieure en stratifié compact



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir, motorisation...



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

# Données techniques

## Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



### Hauteur du plan de travail


H 120 : 1297 mm  
 H 100 : 1057 mm  
 H 80 : 897 mm

## Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail

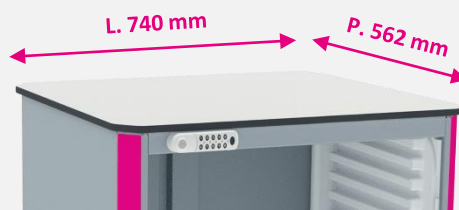

### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm  
 H 100 : 1064 mm  
 H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
 La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Structure</b>         | Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy<br>H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium |
| <b>Plan de travail</b>   | Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm  |
| <b>Glissières</b>        | ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur  |
| <b>Fermeture</b>         | Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm<br>Battant : Aluminium recouvert peinture époxy   |
| <b>Roues</b>             | Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)   |
| <b>Pare-chocs</b>        | 4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant   |
| <b>Bande de couleurs</b> | Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique  |

## Informations diverses

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| <b>Roues</b>        | Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot   |  |   |
| <b>Poids à vide</b> | H 80 : 27 kg   | H 100 : 24 kg  | H 120 : 26 kg   |
| <b>Capacité</b>     | <b>H 80 avec intercalaires standards (40 mm) :</b><br>- 15 pas pour chariot avec rideau<br>- 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant | <b>H 100 avec intercalaires standards (40 mm) :</b><br>- 19 pas pour chariot avec rideau<br>- 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant<br><br><b>H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) :</b><br>- 11 pas pour chariot avec rideau<br>- 12 pas pour chariot sans rideau<br><br><b>H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm</b> | <b>H 120 avec intercalaires standards (40 mm) :</b><br>- 25 pas pour chariot avec rideau<br>- 26 pas pour chariot sans rideau<br><br><b>H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm</b> |
| <b>Verrouillage</b> | Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge  |  |   |

## Emballage

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Conditionnement</b>             | A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection                        |
| <b>Poids (chariot + emballage)</b> | H 80 : 39 kg<br>H 100 : 36 kg<br>H 120 : 38 kg  |
| <b>Dimensions</b>                  | H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m<br>H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m<br>H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m |
| <b>Volume</b>                      | 1,15 m <sup>3</sup>   |