

# Neop | Chariots de soins 600 x 400

## Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulaire : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 3 hauteurs\* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

NEW!

Option EasyMove® : motorisation de chariot  
Option Neop® Lock : motorisation de rideau

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit, bas gauche)

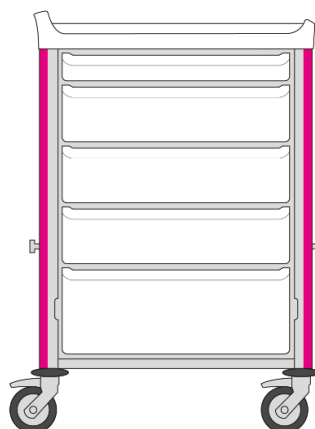

#### Référence

8YS64H100TJ7

### TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE + ACC. 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



#### Référence

8YS64H100TJ4SF

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



#### Référence

8YS64H100TJ4

## TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ1

## TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence


8YS64H100TJ5F

## TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

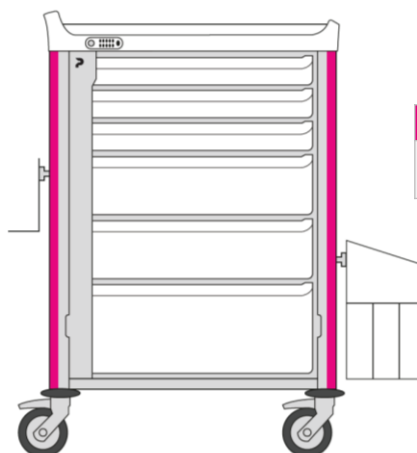

Référence

8YS64H100TJ5

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ2

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TJ6

### TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ3

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple




Référence

8YS64H100TT6SF

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

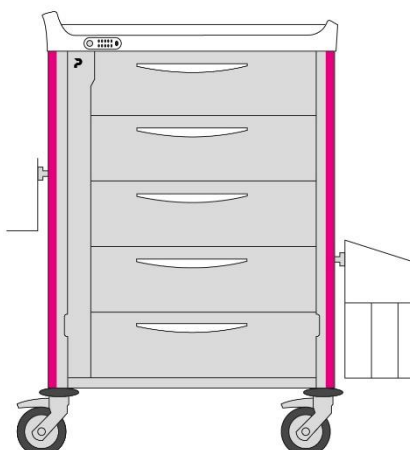

Référence

8YS64H100TT6

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle




Référence

8YS64H100TT1

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm

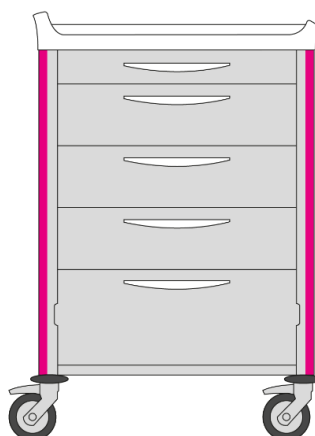


Référence

8YS64H100TT7

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

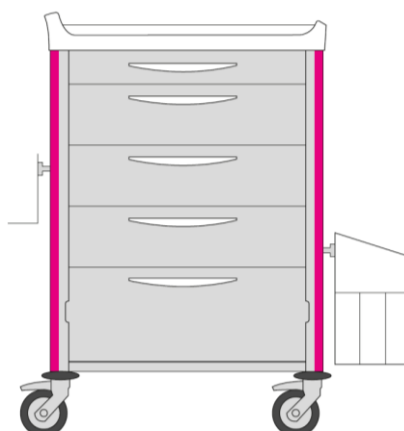

Référence

8YS64H100TT4SF

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (en bas à droite et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT2

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L




Référence

8YS64H100TT5

## TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle

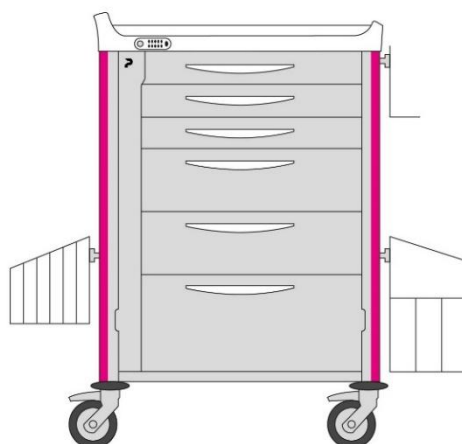

Référence

8YS64H100TT3

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 80 cm

Référence	Désignation
8YCHM164H80FBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette thermoplastique + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette compact + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)


### Chariots hauteur 100 cm

#### CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVIL EN COMPACT

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en compact
- Fermeture à battant
- Serrure à code

Référence	Désignation
8YCHM164H100CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H100 + tablette compact + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

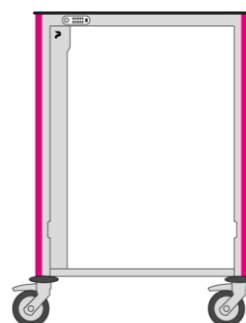


#### CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVIL EN THERMOPLASTIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

Référence	Désignation
8YCHS164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + code + parois pour tiroirs télescopiques

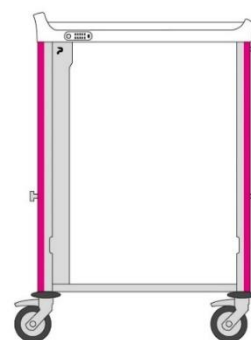


#### CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)

Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCP	Chariot de soins NEOP 1 col. 600x400 H100 + battant + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)

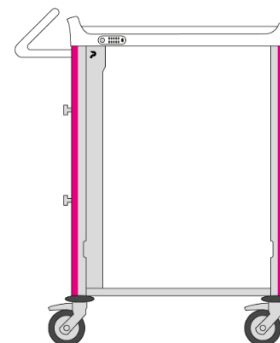



## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION COULISSANTE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension coulissante



Référence	Désignation
8YCHS164H100TC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. coulissante + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100TC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. coulissante + parois pour tiroirs télescopiques

## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




Référence	Désignation
8YCHS164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + parois pour tiroirs télescopiques

## CHARIOT AVEC OPTION MOTORISATION EASYMOOVE®

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation

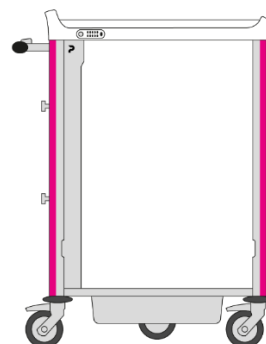

Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 avec option motorisation + battant + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)




# Composition sur mesure

## ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Les références suivantes comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

## ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

		Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*	
1	Tablette supérieure	en thermoplastique avec découpe serrure	8Y001_6400TH		
		en thermoplastique avec découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TC	-
		en thermoplastique sans découpe serrure	8Y001_6400THSP		
		en thermoplastique sans découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TCSP	-
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau manuel pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		rideau motorisé Neop Lock	-	9U000	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1		
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003BADGE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003BADGE1		
4	Couleur	Rose magenta 	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme 	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste 	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage spécifique	8Y132			
6	Motorisation de chariot EasyMoove	-	9R002_L01	9R002_L01	

\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Options, accessoires latéraux et aménagements intérieurs

### Motorisation de rideau Neop® Lock

- Rideau 100 % motorisé avec fermeture automatique et gestion des accès par badge
- Évite les manipulations répétitives : améliore le confort de travail
- Sécurise le contenu du chariot : réduit le risque de vol




### Motorisation de chariot EasyMoove®

- Poussée 100 % motorisée
- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques



### Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroirs...

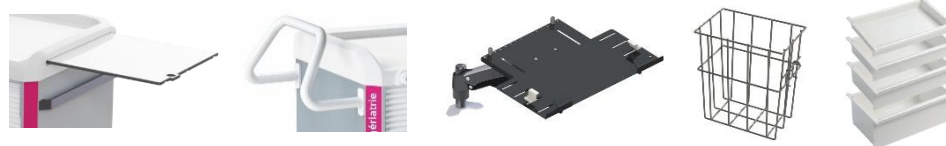

# Données techniques

## Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



Zone de préhension ergonomique

### Hauteur du plan de travail


H 120 : 1297 mm  
 H 100 : 1057 mm  
 H 80 : 897 mm

## Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail

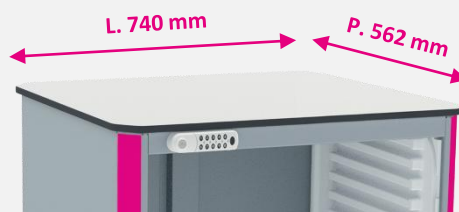

### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm  
 H 100 : 1064 mm  
 H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
<b>Poids à vide</b>	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 80 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	<b>H 100 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant  <b>H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) :</b> - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau  <b>H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm</b>	<b>H 120 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau  <b>H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm</b>
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge		

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
<b>Dimensions</b>	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>