

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Dédié aux secteurs de la gérontologie et du handicap, Satellite® offre une **thérapie non médicamenteuse** en complément du parcours de soins.

Ce chariot, conçu en collaboration avec des médecins, des ergothérapeutes et des psychomotriciens, permet de délivrer des soins multisensoriels basés sur l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher.



Points forts

- ▶ Mobile et autonome ne nécessitant pas de salle dédiée
- ▶ Utilisable dans tout l'établissement y compris en milieu humide
- ▶ Adapté aux personnes alitées ou en fauteuil
- ▶ Combine tous les éléments multisensoriels

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Un chariot ergonomique et simple d'utilisation

Le chariot Satellite® est une solution mobile et autonome, utilisable dans tout l'établissement. Les soins sont délivrés au chevet du patient, qu'il soit alité ou en fauteuil. Sa conception permet une utilisation en salle de bain ou de balnéothérapie.

Désignation

Référence

Chariot de soins multisensoriel Satellite® - avec kit d'accessoires

9T000_1

Chariot de soins multisensoriel Satellite® - sans kit d'accessoires

9T000_2

Enceintes musicales
haute définition


Projecteur orientable
pour une diffusion de vidéos
au mur ou au plafond

**Diffuseurs d'huiles
essentielles :**
6 senteurs différentes

Fibres optiques,
qui changent de couleur,
placées à hauteur optimale
pour personne
alitée ou en fauteuil

**Tiroirs dédiés au stockage
du petit matériel :**
balles lumineuses, balles hérisson,
coussin chauffant...

Mur de bulles d'eau
grande dimension :
circulation harmonieuse
et pompe silencieuse

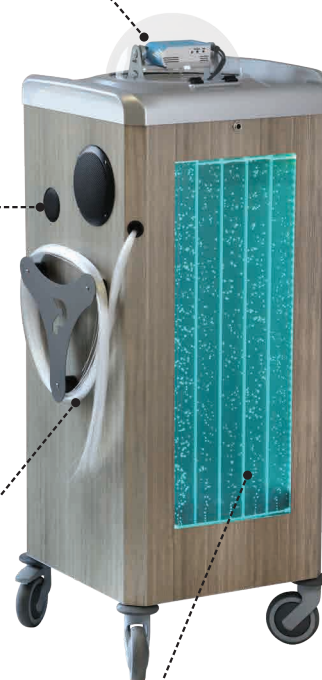

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Programmes de soins


Le chariot Satellite® propose six programmes prédéfinis et un programme libre. Le programme est sélectionné en fonction du protocole de soins non médicamenteux de la personne.

Les programmes de soins se lancent en une seule action : à partir du pupitre de commande ou à distance, à partir de la tablette tactile. Tous les éléments multisensoriels s'activent simultanément : vidéo, musique, senteur, mur bulles d'eau et fibres optiques.



Programmes de soins prédéfinis

- ▶ Stimulant
- ▶ Balnéo
- ▶ Avant-repas
- ▶ Apaisant
- ▶ Reposant
- ▶ Nuit

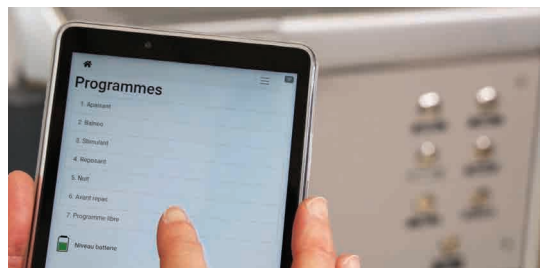

Programme libre

Le programme libre est un programme sur mesure, dont les paramètres sont définis en utilisant la tablette. Il est possible de copier un programme existant, puis de le modifier par une donnée d'un autre programme. Chaque paramètre multisensoriel est activable ou désactivable.

Vidéoprojecteur

Le vidéoprojecteur est sécurisé par un dôme fermant à clé. Ce dôme le protège notamment des projections d'eau lors d'utilisation en balnéothérapie. Le vidéoprojecteur est facilement orientable et inclinable pour une projection au mur ou au plafond.



Huiles essentielles

Six senteurs d'huiles essentielles BIO sont stockées dans un tiroir du chariot et se diffusent par ventilation. Les huiles essentielles ont été choisies en fonction de leurs propriétés, sans contre-indications chez les personnes âgées.

Désignation

Référence

Huile essentielle Petit grain bigarade	9T200
Huile essentielle Synergie (Lavande / Camomille romaine / Fleur oranger)	9T201
Huile essentielle Orange douce	9T202
Huile essentielle Marjolaine à coquille	9T203
Huile essentielle Citron	9T204
Huile essentielle Lavande vraie	9T205

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Composition du kit accessoires

Désignation	Référence
Kit d'accessoires pour chariot Satellite®	9T100

Balle hérisson



Leurs petits picots procurent bien-être et détente. Au creux de la main on s'amuse à les faire rouler entre les paumes. Essayez-les aussi en massage sur tout le corps pour stimuler les sens tactiles et proprioceptifs.

Diamètre : 6 cm.

En PVC - Coloris selon stock.

Oeufs lumineux



Lot de 3 œufs lumineux aux subtils changements de couleur et à la luminosité reposante. Très bel objet, lisse et léger, qui invite à l'exploration tactile et visuelle dans le cadre d'un environnement multisensoriel.

Fonctionne avec 3 piles boutons incluses.

Ampoule LED. Dimensions : 9 cm.

Balle tactile



Cette balle colorée éveille les sens grâce à ses picots ! Idéale en massage sur le corps afin de procurer un moment de détente et faire prendre conscience de son corps. Recouverte de renflements souples, elle est aussi utilisée dans le cadre d'activités sportives.

Diamètre : 12 cm. En PVC. Sans latex.

Coloris selon stock.

Kalimba 9 lames



Kalimba accordée La4-Do5-Do4-La4-La3-Fa4-Mi4-Mi5-Si4. Elle se tient au creux des deux mains et se joue avec l'extrémité des deux pouces. Elle est parfaitement accordée et sa peau synthétique procure un son brillant et permet de jouer l'instrument entre les mains ou posé pour plus de volume et de variations.

Dimensions : L. 19,8 cm x l. 15,8 cm x H. 4,4 cm.

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Coussin vibrant



Ce coussin vibrant est très doux au toucher grâce à son tissu blanc effet fourrure. Les vibrations douces encouragent la relaxation et fonctionnent bien pour calmer les personnes surstimulées. L'interrupteur permet de choisir entre 2 intensités de vibration ou une utilisation sans vibration.

Housse amovible lavable en machine.
Fonctionne avec 2 piles LR06 incluses.
Dimensions : 30 x 30 cm.

Couverture sensorielle



Cette couverture est adaptée aux troubles de la perception sensorielle. D'un côté, une surface très douce au toucher parsemée de petits renflements invite à l'exploration et au cocooning. Le recto est composé de matières différentes pour éveiller l'intérêt et la curiosité de l'utilisateur.

Dimensions : 80 x 80 cm.

Tapis lestés graines de lin



Un petit tapis lesté rempli de graines naturelles de lin que l'on peut faire chauffer au four micro-ondes et refroidir au frigo.

Housse amovible pour un entretien facile.
Coloris bleu marine.
Dimensions : 50 x 34 cm - Poids : 1,255 kg.

Mobilier de soins et équipements de service

Chariot de soins multisensoriel Satellite®

Caractéristiques techniques

Matières

Tablette	ABS / PMMA traité chimiquement gris
Bulle vidéo	PMMA translucide
Caisson / battant	Aluminium traité à l'époxy
Façades tiroirs et pupitre	Stratifié compact gris épaisseur 8 mm
Enrouleur fibre / support tablette	Acier traité à l'époxy
Covering	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Verrouillage

Tiroirs	Serrure à code
Tiroir technique (batteries)	Serrure à clé numéro différent
Bulle vidéoprojecteur	Serrure à clé numéro différent

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes Double blocage de la roue et du pivot
Capacité	3 tiroirs dédiés au rangement des accessoires
Charge maxi admissible	6 kg par tiroir
Poids à vide du chariot	76 kg
Charge maxi admissible	20 kg
Pente maxi	10°

Dimensions



Caractéristiques électriques

Alimentation	Batteries : 12 V - DC / 3A - 36 W (sectionneur permettant de mettre le circuit en sécurité) Chargeur : Input 220-240 VAC - 50-60 Hz - Max 2,1 A (protégé par fusible)
Courant	3 A
Tension	12 V
Technologie des batteries	Plomb
Nombre de batteries	2
Type de montage	Parallèle
Tension pour 1 batterie	12 V
Capacité pour 1 batterie	14 Ah
Temps de charge	6-7 heures
Indice de protection	IP 44
Antenne	WiFi - 2,4 GHz
Carte électronique	Raspberry
Normes applicables	Directive 2014/53/UE EN 300 328 EN 301 893