

# Neop | Chariots d'urgence 600 x 400 à tiroirs télescopiques

## Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs

### Coloris

Rouge garance



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur\* 100
- Zone de préhension ergonomique
- Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du chariot en rompant le scellé par simple torsion. Après chaque utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage unique numéroté.
- Tiroirs télescopiques à sortie totale, sur coulisses à billes avec amortisseur et butée de fin de course, avec bacs à lèbres
- Version 5 tiroirs ou 6 tiroirs
- Berceau pour bacs à lèbres adapté à la majeure partie des bacs à lèbres disponibles
- Bac à lèbres extractible pour faciliter le nettoyage
- Planche à massage cardiaque sur support



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


## Configurations types - PREMIUM

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ

#### 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50 équipé d'un kit de compartimentage 16 cases
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100 équipé d'un kit de compartimentage 9 cases
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 rail en bas à droite
- 1 support bouteille à oxygène

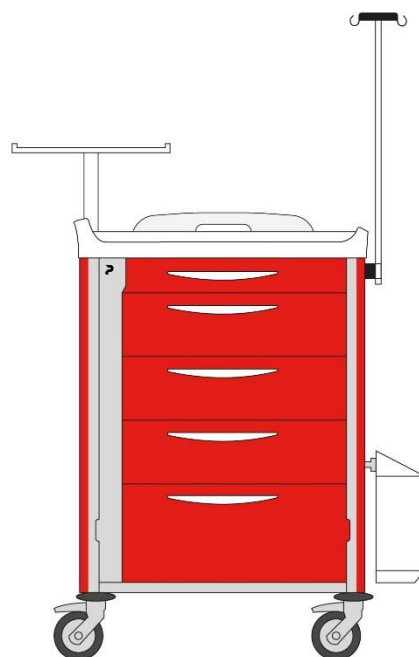


Référence	Désignation
8Y164H100T.U2P	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques avec compartimentage

### CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ

#### 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

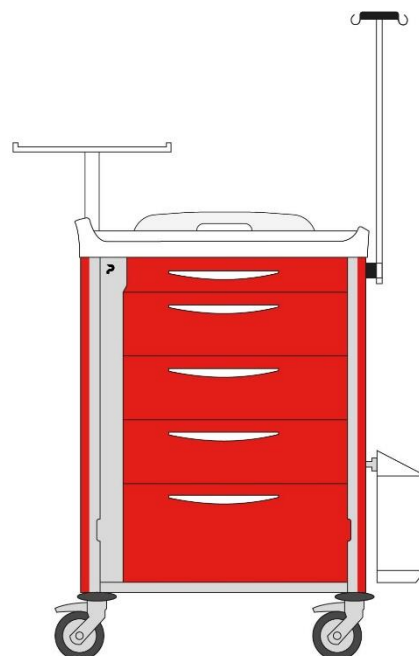


Référence	Désignation
8Y164H100T.U2	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE ÉQUIPÉ 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque
- 1 support monitoring
- 1 tige porte sérum avec 2 crochets
- 1 support bouteille à oxygène
- 1 rail en bas à droite

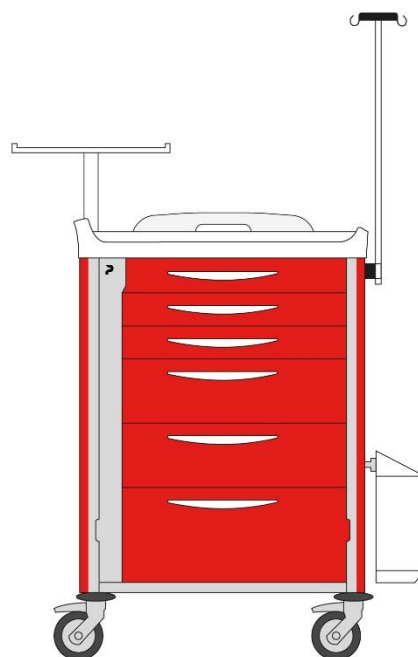


Référence	Désignation
8Y164H100T.U4	Chariot d'urgences NEOP équipé 600x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE 5 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

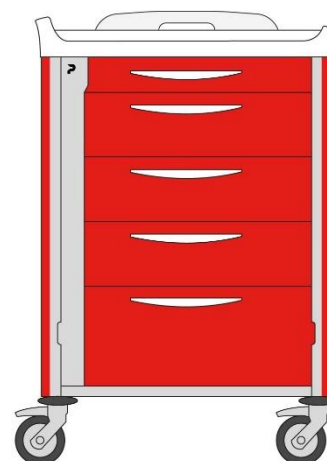

Référence	Désignation
8Y164H100T.U1	Chariot d'urgences NEOP de base 600x400 H100 - 5 tiroirs télescopiques


*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

## CHARIOT D'URGENCE DE BASE

### 6 tiroirs télescopiques

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- 1 fermeture à battant avec sécurisation par scellé
- 1 jeu de 20 scellés
- 3 tiroirs télescopiques F600 H80 avec bac à lèvres plein H50
- 2 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres ajouré H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres ajouré H200
- 1 support pour planche de massage cardiaque
- 1 planche à massage cardiaque

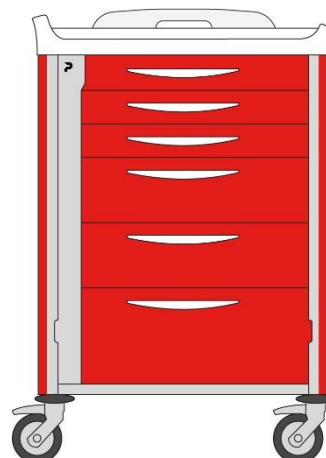

Référence	Désignation
8Y164H100T.U3	Chariot d'urgences NEOP de base 600x400 H100 - 6 tiroirs télescopiques

*Les tiroirs télescopiques équipés de bacs à lèvres peuvent être compartimentés avec des kits de compartimentage ou des peignes, à commander séparément.*

# Données techniques

Dimensions hors tout du chariot



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.

Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	Coulisse bille acier zingué avec amortisseur
Tiroirs	Façade en stratifié compact ép. 8 mm / Cadre en aluminium traité EPOXY, bacs à lèvres en ABS
Fermeture	Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

## Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
Poids à vide	38 kg	
Capacité	U1 / U2 : - 1 tiroir HT 80 mm - 3 tiroirs HT 160 mm - 1 tiroir HT 240 mm en compact	U3 / U4 : - 3 tiroirs HT 80 mm - 2 tiroirs HT 160 mm - 1 tiroir HT 240 mm en compact
Verrouillage	Scellés	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	
Equipements	Modèle de base (U1/U3) : Planche de massage cardiaque	Modèle équipé (U2/U4) : Planche de massage cardiaque / Support bouteille à oxygène / Tige porte sérum / Support monitoring

## Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	50 kg	Volume	1,15 m <sup>3</sup>