
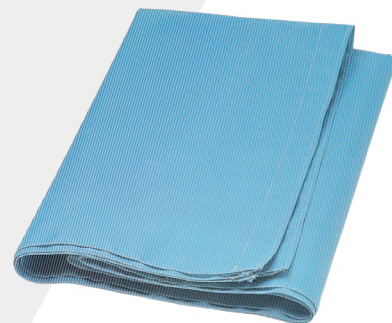


Gamme transfert

Systemes de transfert latéral

Afin de **faciliter le déplacement** latéral des patients, PRATICIMA vous propose les planches Transglide® accompagnées de leur drap de traction.

Ces produits améliorent considérablement les conditions de travail du personnel soignant. Ils sont idéals pour les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.

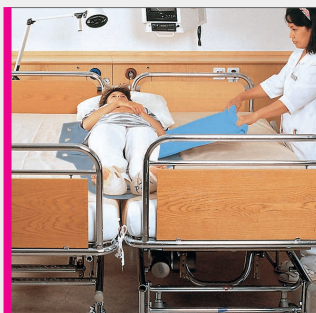

Points forts

- ▶ Maniement pratique
- ▶ Excellentes propriétés de glissement
- ▶ Léger et peu encombrant
- ▶ Entretien facile



Hygiénique



Ergonomique

Plaques de transfert Transglide®

Accompagnées d'un drap de traction, ses plaques permettent de repositionner facilement les patients. Leur surface supérieure a l'avantage d'être particulièrement glissante, contrairement à leur surface inférieure munie de bandes de sécurité.

- ▶ Poids : 3,5 kg
- ▶ Composition : HDPE (matériau solide, incassable)
- ▶ Neutre au plan écologique et toxicologique
- ▶ Perméable aux rayons X
- ▶ Permet de surmonter des différences de niveau jusqu'à 15 cm
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Plaque Transglide® grand modèle	L. 1700 x P. 650	SAA71401
Plaque Transglide® petit modèle	L. 1400 x P. 480	SAA71402



Drap de traction Transglide®

Ce drap de traction est le complément indispensable des plaques de transfert Transglide®. Il permet de latéraliser le patient afin de placer la plaque en dessous de lui, facilement et sans effort.

- ▶ Poids : 0,2 kg
- ▶ Composition : nylon résistant
- ▶ Souple, se plie facilement
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Drap de traction Transglide®	L. 1500 x P. 1500	SAA71451

